


alghamix II

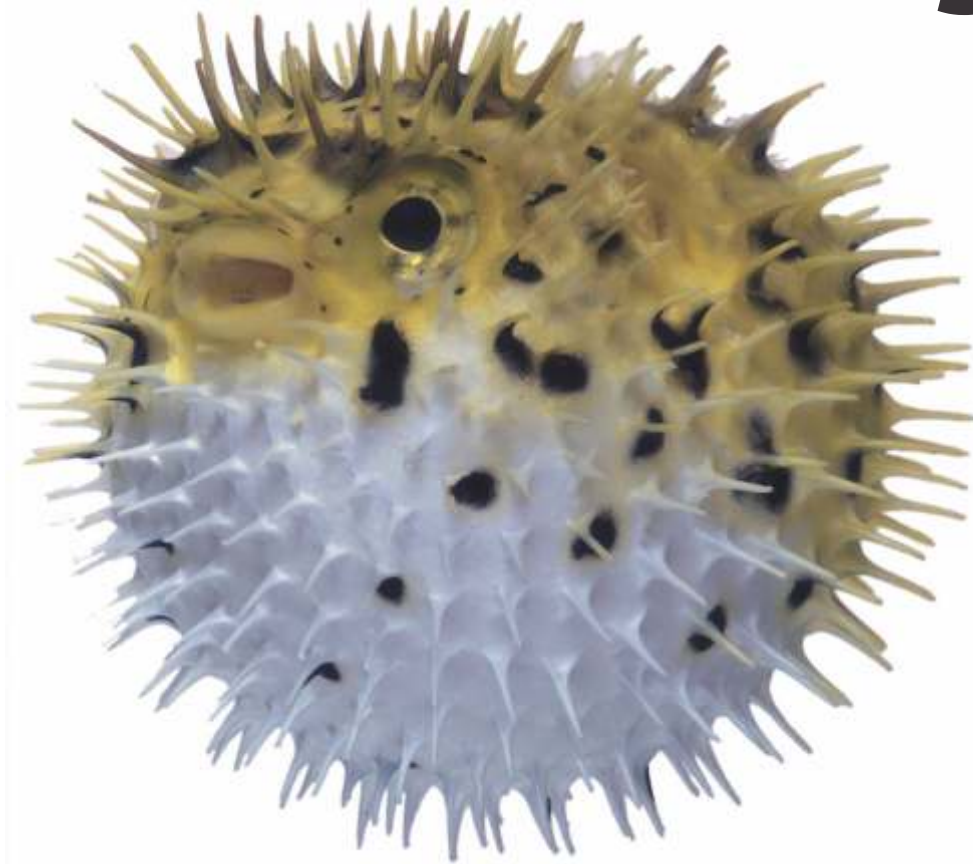

ARE YOU A BUBBLE HUNTER?

Equipment
Mixing machine

Zhermack[®]
CLINICAL

alghamix II



ALGHAMIX II é a ***nova versão*** de um dos ***misturadores mecânicos*** para alginatos, silicones e gessos mais bem conceituados do mercado mundial.

Seu design ergonômico e as ***cores personalizáveis*** das cubas permitem que alghamix II se adapte a qualquer consultório dental.

Extremamente fácil de usar, com garantia de mistura livre de bolhas.

ALGHAMIX II para mistura
mecânica de *alginatos, gessos e
silicones* de uso dental

**Design
Moderno**



alghamix II

APLICAÇÕES

■ Mistura de alginato



■ Mistura de silicone



■ Mistura de gesso



O posicionamento da **cuba** facilita a dosagem e as operações de mistura, ao mesmo tempo em que assegura uma **máxima estabilidade** durante todas as etapas do processo.

**Estabilidade
máxima**

CARACTERÍSTICAS

alghamix II

- 2 velocidades de rotação da cuba (120 giros/min – 250 giros/min)
- Cuba com trava tipo baioneta
- Tamanhos de cuba disponíveis: pequena 350 cc– grande 600 cc (opcional)
- Cores de cuba disponíveis: cinza, laranja, verde, azul marinho, branca
- Bloco de mistura para silicone
- Estrutura em ABS
- Dispensa o uso de lubrificantes
- Não requer manutenção





■ **DUPLA VELOCIDADE:**
duas velocidades de rotação da cuba (lenta e rápida) permitem uma mistura de acordo com a preferência do operador



■ **SELETOR ERGONÔMICO:**
graças ao seu formato ergonômico, o dispositivo para seleção de velocidade torna os movimentos de seleção extremamente naturais



■ **TRAVA TIPO BAIONETA:**
a trava tipo baioneta prende a cuba ao equipamento

alghamix II

EM EVIDÊNCIA



■ **CUBAS COLORIDAS PARA ALGINATOS:**
disponíveis em 4 cores, com capacidade para 350cc



■ **CUBA PARA GESSO ODONTOLÓGICO:**
disponível em versão com capacidade para 600cc



■ **BLOCO DE MISTURA PARA SILICONE:**
bloco de mistura contendo 20 folhas



As cubas de **ALGHAMIX II** são *práticas para limpar*, e fornecidas em 5 cores diferentes, sob encomenda.

PERSONALIZAÇÃO

alghamix II



Desenvolvido para adaptar-se a qualquer ambiente de trabalho, alghamix II pode ser **personalizado** com cubas coloridas que combinam com as cores de mobiliário mais comumente usadas



ALGHAMIX II garante uma
mistura homogênea, totalmente
uniforme e livre de bolhas

ALGHAMIX II reduz o tempo
de mistura em 30% ()

alghamix II **TÉCNICA EM EVIDÊNCIA**



*Detalhe de uma mistura manual de
alginato*



*Detalhe de uma mistura mecânica de
alginato com ALGHAMIX II*



alghamix II

Modelos

Código	Modelo	Dimensões	Peso	Voltagem	Potência
C303215	ALGHAMIX II 115V	L 170 / W 270 / H 210 mm	3 kg	115 V ± 10 50/60 Hz	50 Watts
C303230	ALGHAMIX II 230V	L 170 / W 270 / H 210 mm	3 kg	230 V ± 10 50/60 Hz	50 Watts
C303231	ALGHAMIX II 230V - Versão GB	L 170 / W 270 / H 210 mm	3 kg	230 V ± 10 50/60 Hz	50 Watts

Acessórios fornecidos com o equipamento

Modelo
Cuba cinza para alginatos 350 cc
Espátula para mistura

Acessórios

C303160	ALGHAMIX II CUBA PARA ALGINATO 350 cc LARANJA	XR0250670	Prato de mistura para silicone
C303165	ALGHAMIX II CUBA PARA ALGINATO 350 cc AZUL	C300990	Espátula colorida fluorescente – 6 pçs
C303170	ALGHAMIX II CUBA PARA ALGINATO 350 cc VERDE	C303030	Bloco de mistura com 20 folhas
C303175	ALGHAMIX II CUBA PARA ALGINATO 350 cc BRANCA	C207200	Espátula para misturar silicone
C303185	ALGHAMIX II CUBA PARA GESSO 600 cc CINZA		

BRANCHES

GERMANY
Zhermack GmbH
Deutschland
Öhlmühle 10 - D-49448 Marl
Tel. +49 - 0 54 43 / 20 33 - 0
Fax +49 - 0 54 43 / 20 33 - 11
info@zhermack.de
www.zhermack.com

POLAND
Zhermapol Sp. z o.o.
ul. Augustówka 14
02 - 981 Warszawa - Polska
Tel. +48 - 22 858 82 72
+48 - 22 858 73 41
Fax +48 - 22 642 07 14
biuro@zhermapol.pl
www.zhermapol.pl

USA
Zhermack Inc.
P.O. Box 4195, River Edge
New Jersey 07661 - 4195
Tel. +1 - (877) 819 6206
+1 - (732) 389 8540
Fax +1 - (732) 389 8543
info@zhermackusa.com
www.zhermackusa.com

COUNTRY CONTACTS

UK AND IRELAND
Tel. +44 - (0)7860 346 129
uk@zhermack.com

SPAIN
Tel. +34 - 900 99 39 52
info.spain@zhermack.com

TURKEY
Tel. +90 533 76 44 955
info.turkey@zhermack.com

FRANCE
Tel. +33 - 0800 915 083
info.france@zhermack.com

RUSSIA
Tel. +7 - 916 930 1191
info.russia@zhermack.com

MEXICO AND CENTRAL AMERICA
Tel. +52 - 1 55 919 804 97
info.mexico@zhermack.com

SOUTH AMERICA
Tel. +57 - 310 2601 777
info.colombia@zhermack.com

Zhermack SpA

Via Bovazecchino, 100 - 45021 Badia Polesine (RO) ITALY Tel. +39 - 0425 597611 Fax +39 - 0425 53596 info@zhermack.com www.zhermack.com

Zhermack®
BEYOND INNOVATION

labordental Ltda.
Desde 1977

Av. Aratãs, 164 - São Paulo, SP - 04081-000 / (11) 5542.5855
vendas@labordental.com.br / labordental.com.br