

doublemix



DOUBLEMIX. VELOCIDADE MÁXIMA.

Equipment

Duplication silicone dispensing unit

Zhermack®
TECHNICAL



Doublemix é um novo misturador automático de ***silicones por adição*** para duplicação, desenvolvido pela ***Zhermack***, que proporciona velocidade e qualidade constantes para as duplicações de todos os dias.

A facilidade do uso e a combinação com o ***elite double extra fast*** (1kg, 5kg, 10kg) fazem do doublemix um equipamento de extrema versatilidade.

Seu design simples e moderno se adapta perfeitamente a qualquer laboratório de prótese dental, e a solidez dos materiais que o compõe garantem uma durabilidade máxima.

doublemix

*Design
moderno*



Zhermack
TECHNICAL



DOUBLEMIX simplifica o processo cotidiano de mistura, ao misturar velozmente o silicone, proporcionando um *rendimento máximo*.



DUPLICAÇÕES INDIVIDUAIS



DUPLICAÇÕES REPETIDAS

**Alinhamento
do fluxo**



CARACTERÍSTICAS

- Bomba dosadora com proporção de mistura 1:1
- Prato ajustável para acoplamento da ponta misturadora
- Suporte com braços de apoio ajustáveis (opcional)
- **Acoplamentos rápidos** para conexão dos recipientes **com a válvula de interrupção do fluxo**
- Pré-instalação para o acoplamento direto com todas as embalagens de **elite double** (1kg, 5kg, 10kg)
- Filtros sinterizados tipo baioneta para a eliminação do ar dos recipientes
- Recipientes opcionais transparentes com capacidade para 2 kg



FLUXO DIRECIONÁVEL:
o prato ajustável facilita a operação de introdução da ponta misturadora e a distribuição homogênea de silicone no interior da mufla.



CENTRO DA MUFLA:
o suporte de alumínio favorece o posicionamento correto da mufla sobre a superfície de trabalho.



RECIPIENTES OPCIONAIS:
os recipientes opcionais fornecidos como acessórios permitem o uso dos principais silicões líquidos disponíveis no mercado.

DESTAQUES

doublemix



ACOPLAMENTO RÁPIDO:

o sistema de conexões rápidas com válvulas de interrupção do fluxo, e que impedem que o usuário inverta base e catalisador, evitando a formação de bolhas de ar no circuito.



DESIGN:

o design de última geração, com estrutura com braços de apoio ajustáveis, é compatível com todas as embalagens de elite double.




BOTÃO DE ATIVAÇÃO:

a posição central do botão de ativação facilita as operações de preenchimento da mufla.



UNIFORMIDADE E REPETIÇÃO:
DOUBLEMIX utiliza uma bomba dosadora que garante a mistura homogênea do silicone, para obter sempre duplicações de qualidade. Em oposição à mistura manual, *DOUBLEMIX* não introduz bolhas de ar.

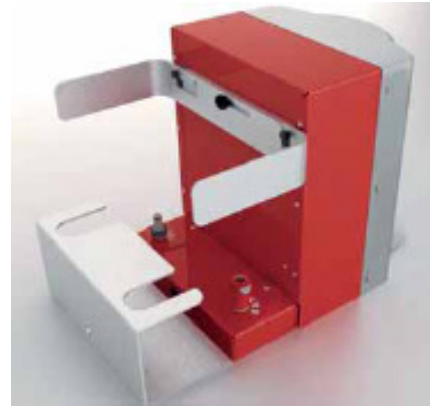

VERSATILIDADE: O acoplamento rápido de todas as embalagens de *elite double* elimina a fase de dosagem manual por parte do usuário, assegurando uma máxima precisão e uma proporção 1:1 exata.



VELOCIDADE E ECONOMIA DE TEMPO: o uso de *DOUBLEMIX* em combinação com *elite double extra fast* permite realizar a duplicação de um modelo em pouco mais de 6 minutos. 1:30 min, tempo de mistura e 5:00 min, tempo de endurecimento