

SLIM PAD

WET'N'DRY



O essencial, sem compromisso

O novíssimo modelo Wet'n'Dry SlimPad sintetiza todas as demandas e sugestões que nos foram trazidas por muitos de vocês.

...y estamos bastante orgulhosos do resultado apresentado por nossa equipe de design !

- **Base de trabalho muito fina**
- **Compacta, design minimalista**
- **Formato de laptop fácil de carregar**
- **Empilhável**
- **Superfície de trabalho de 240 x 135 mm**
- **Disponível em branco e em preto**



13090-BLACK



13090-WHITE




Wet'n'Dry SlimPad conta com uma placa de vidro na qual seis ranhuras foram precisamente calculadas para receber as tiras negras de PVA que deverão ser inseridas verticalmente, e que irão absorver o líquido que se encontra no reservatório, de modo a trazê-lo para a superfície.

A sua porcelana, em contato com as tiras úmidas, conservará a consistência desejada por dias inteiros, enquanto houver líquido no reservatório.

NANO-hydrophobic

Junto com a sua SlimPad, você receberá uma amostra da solução revolucionária « NANO-hidrofóbica », um produto mágico que irá tratar a superfície do vidro, reduzindo consideravelmente sua tensão superficial.

Resultado : suas massas cerâmicas conservam a sua consistência e permanecem compactas, e a superfície de trabalho fica mais limpa – enfim, ainda mais conforto para o seu trabalho !

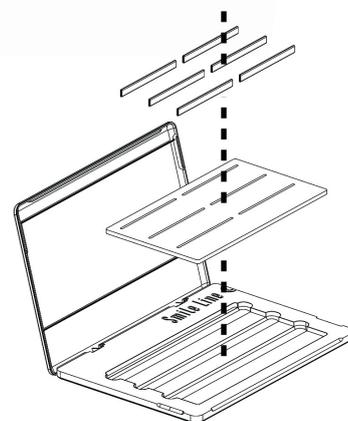

Descrição	Artigo no.
Wet'n'Dry SlimPad branca, estojo : 1 recipiente com tampa, placa de vidro com ranhuras, 10 tiras pretas em PVA, solução hidrofóbica NANO	13090-WHITE
Wet'n'Dry SlimPad preta, estojo : 1 recipiente com tampa, placa de vidro com ranhuras, 10 tiras pretas em PVA, solução hidrofóbica NANO	13090-BLACK
Placa de vidro para reposição 240 x 135 x 4 mm, 10 tiras pretas em PVA, solução hidrofóbica NANO (10ml)	13091
« The Black Ones », tiras pretas em PVA, 10 pçs	11094-B
NANO, solução hidrofóbica 10 ml	1160

Smile Line ☺

made in switzerland

Smile Line SA
 PO Box 229
 CH-2610 St-Imier · Switzerland
 mail@smileline.ch
 www.smileline.ch