

# elite glass



F121010 - 18-05

## Embalagem

C401610 ELITE GLASS 2 cartuchos x 50 ml (base + catalisador) + 6 ponteiros de mistura médias/verdes

## Acessórios

C202080 PONTEIRAS DE MISTURA MÉDIAS/VERDES Ponteiros de mistura verdes (48 unidades)

C202100 DISPENSADOR D2 Dispensador D2 - 1:1

## BRANCHES

### GERMANY

Zhermack GmbH Deutschland  
Ölmühle 10 - D-49448 Marl

T +49 (0) 54 43 / 20 33 - 0  
F +49 (0) 54 43 / 20 33 - 11  
Info@zhermack.de  
www.zhermack.de

### POLAND

Zhermapol Sp. z o.o.  
ul. Augustówka 14  
02 - 981 Warszawa - Polska

T +48 22 858 82 72  
+48 22 292 71 17  
F +48 22 642 07 14  
biuro@zhermack.com  
www.zhermapol.pl

### USA

Zhermack Inc.  
P.O. Box 4195, River Edge  
New Jersey 07661 - 4195

T +1 (877) 819 6206  
+1 (732) 389 8540  
F +1 (732) 389 8543  
Info@zhermackusa.com  
www.zhermackusa.com

Zhermack S.p.A. | Via Bovasecchino, 100 | 45021 Badia Polesine (RO) ITALY  
T +39 0425 597611 | F +39 0425 53596 | info@zhermack.com | www.zhermack.com

Zhermack

# *elite glass*



**Clinical**

A-Silicone Clear Matrix Material

**Zhermack**   
Dental



# elite glass

## A clareza dos detalhes

**ELITE GLASS** é o novo silicone de adição da **ZHERMACK** em cartuchos de automistura de 50 ml para a construção de matrizes extremamente transparentes, usadas para o processamento direto de **restaurações cosméticas**.

### VERSATILIDADE DE OPERAÇÃO

**ELITE GLASS** pode ser usado em **várias situações clínicas**, processando a matriz diretamente na cavidade oral do paciente (por exemplo, caracterizações) ou, alternativamente de maneira indireta, com base em um modelo (por exemplo, fixação de diastemas, correção de rotações, fraturas, anomalias dentais, coroas temporárias).

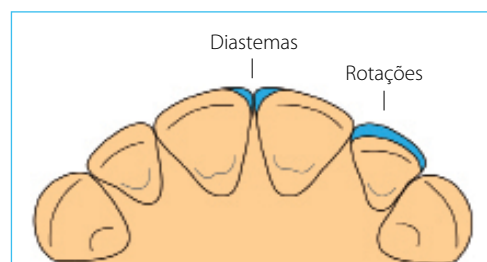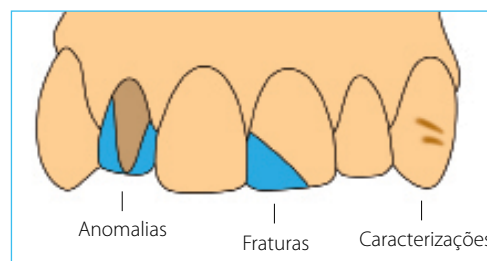

### TRANSPARÊNCIA EXTREMA

A nova formulação de **ELITE GLASS** garante matrizes **altamente transparentes**, o que garante a **perfeita fotopolimerização** do compósito usado para a restauração.

### RIGIDEZ IDEAL

A rigidez ideal das matrizes criadas com o uso de **ELITE GLASS** garante que a **forma original** permaneça inalterada e simplifica o reposicionamento **sem deformações**.

## RESULTADOS ESTÉTICOS DE QUALIDADE

As matrizes criadas com o uso de **ELITE GLASS** permitem obter **resultados estéticos excelentes** em **curto espaço de tempo**, o que simplifica os procedimentos clínicos.

### CASO CLÍNICO DIRETO



Caso inicial



Criação da matriz com ELITE GLASS: deixe pelo menos 2 mm de silicone ao redor dos dentes\*



Certifique-se de que não haja defeitos na área envolvida na moldagem



Preparação da faceta



Tratamento da superfície\*\*



Aplicação do compósito, começando pela zona incisal e movendo-se na direção da borda cervical



Reposicionamento da matriz feita com ELITE GLASS na cavidade oral, certificando-se de que não haja folgas entre a matriz e os dentes. Fotopolimerize através da matriz\*\*



Acabamento do compósito: remova o excesso de material e faça o polimento\*\*



Resultado final

\* Importante: lembre-se de aparar o nível de material ao usar pela primeira vez

\*\* Siga as instruções fornecidas pelo fabricante do compósito

## DADOS TÉCNICOS

Tempo de trabalho	40 segundos
Tempo na cavidade oral	1 min 30 s
Tempo de presa	2 min 10' s

Considera-se o tempo de trabalho do início da mistura a 23 °C (73 °F),  
Considera-se o tempo na cavidade a 35 °C (95 °F)