


R-Motion®

**RECIPROCANTE
REDEFINIDO**

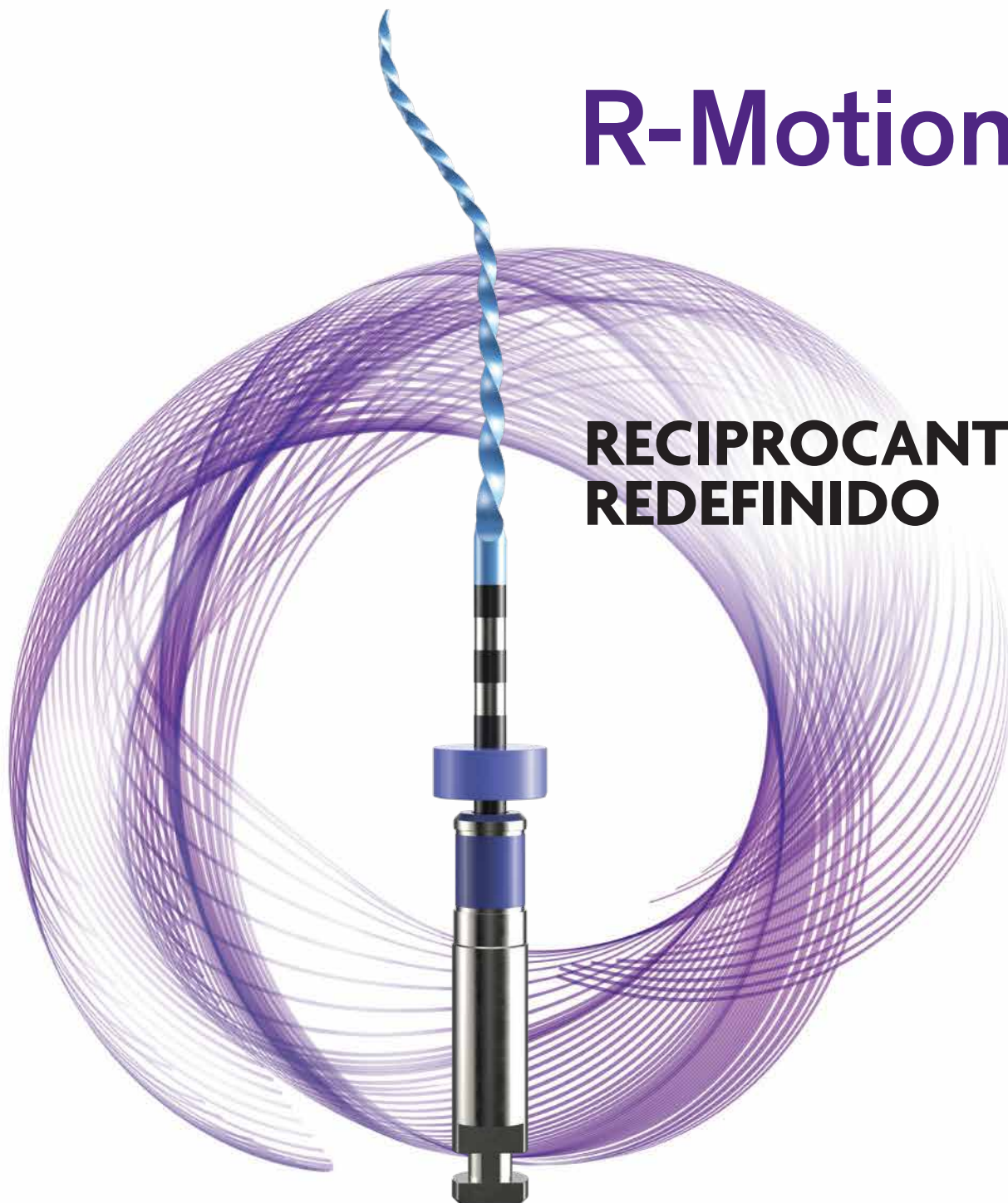

SEGURO. FÁCIL. MINIMAMENTE INVASIVO.

www.fkg.ch/r-motion

Instrumentos Reciprocantes CONSERVADORES, FÁCEIS DE USAR e que inspiram CONFIANÇA

ELEVADA FLEXIBILIDADE

e progressão segura graças ao processo de tratamento térmico patenteado aplicado aos instrumentos R-Motion®.

ELEVADA RESISTÊNCIA

à fadiga cíclica, aumentando a segurança do paciente.

ELEVADO CONTROLE

para uma progressão mais suave e com menos riscos através de design e tratamento térmico exclusivos.

UTILIZAÇÃO SIMPLES E COM ECONOMIA DE TEMPO*

através de um instrumento único reciprocante de preparo.

SISTEMA RECIPROCANTE MINIMAMENTE INVASIVO

devido às conicidades reduzidas, que oferecem maior** respeito à anatomia do canal.

GLIDE PATH ÚNICO

instrumento para preparo do canal, totalmente integrado no conceito do R-Motion®.

R-Motion®

Gama de Produtos:

LIMA DE GLIDE PATH

R-Motion Glider



LIMAS DE PREPARO

R-Motion 25



R-Motion 30



R-Motion 40



R-Motion 50



UMA SEQUÊNCIA QUE SE ADAPTA À MAIORIA DOS CASOS

GLIDE PATH

R-Motion Glider



PREPARO

R-Motion 25



R-Motion 30



ou ***

* Em comparação com sistemas de várias limas.


** Em comparação com sistemas reciprocantes de níquel titânio padrão.

*** Selecione o instrumento de preparo com base na sua abordagem terapêutica.

Tratamento SEGURO e CONTROLADO


Maior Flexibilidade

Graças a um processo de tratamento térmico exclusivo, identificável pela cor azul do instrumento, o R-Motion® oferece maior flexibilidade, permitindo que os clínicos tratem uma maior variedade de anatomias radiculares.

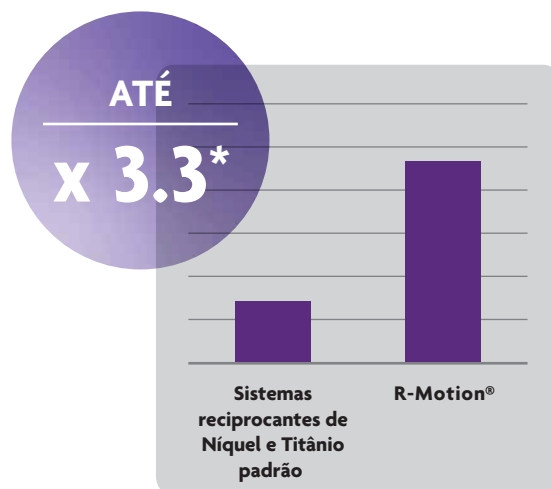


Maior Resistência à Fadiga Cíclica

Os instrumentos R-Motion têm alta resistência à fadiga cíclica por conta do tratamento térmico patenteado. A alta resistência à fadiga cíclica reduz o risco de fratura do instrumento, consequentemente aumentando a segurança do paciente.

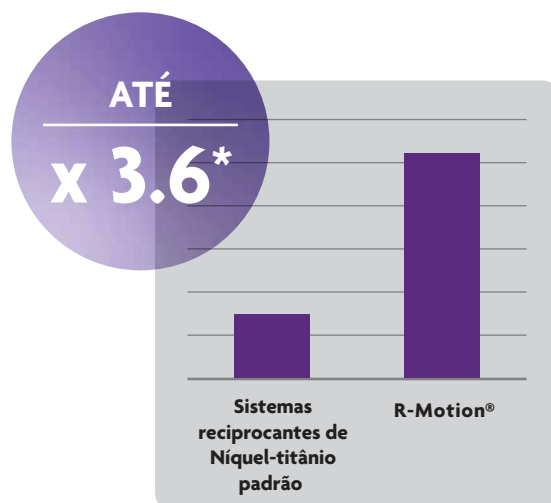

Menor Efeito de Rosqueamento

O R-Motion® foi concebido para diminuir o efeito de rosqueamento, permitindo que o clínico tenha um melhor controle e segurança durante o tratamento endodôntico.

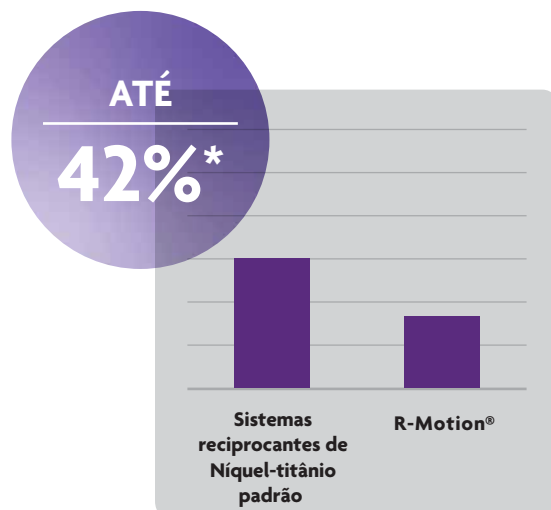


* Com base em resultados de laboratórios internos, em comparação com instrumentos equivalentes de concorrentes.

MINIMAMENTE INVASIVO através de uma Combinação de Características de Eficácia Comprovada


Maior Respeito pela Anatomia do Canal

A maior flexibilidade e o design do R-Motion® permitem uma melhor capacidade de centragem e respeito pela anatomia do canal.

Os núcleos de tamanhos reduzidos dos instrumentos R-Motion® são menos invasivos do que as limas concorrentes equivalentes, diminuindo o risco de remoção excessiva da dentina e minimizando o impacto em áreas não infectadas.

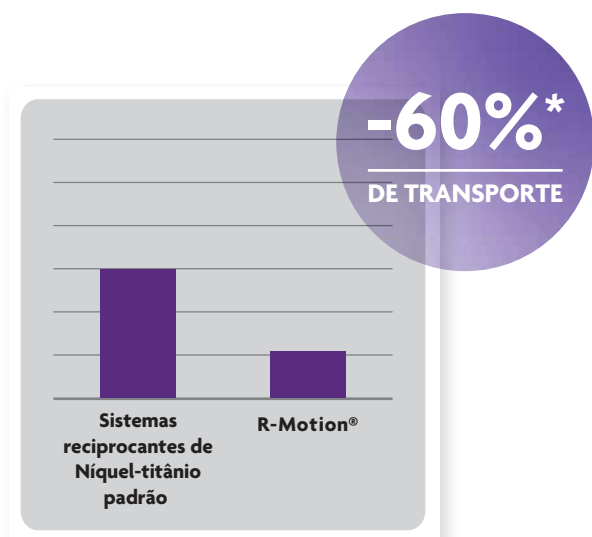


R-Motion 30 Sistemas reciprocantes de níquel-titânio padrão

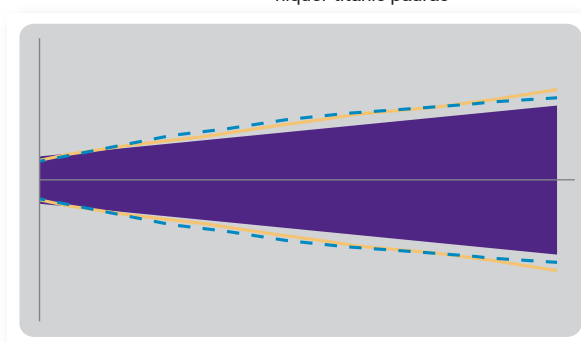

Eficiência de Corte Melhorada

O corte transversal triangular com arestas afiadas, faces livres arredondadas e uma ponta otimizada** oferecem a combinação perfeita para maior eficiência de corte até ao ápice, preservando a dentina.

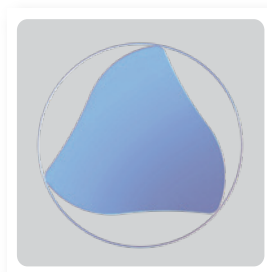

Menos Tensão sobre a Dentina

O design exclusivo e tamanho reduzido do núcleo do R-Motion® diminuem significativamente a tensão sobre a dentina durante o tratamento do canal radicular.



* Com base em resultados de laboratórios internos, em comparação com instrumentos equivalentes de concorrentes.

** Patente pendente.

Referências dos Produtos

INSTRUMENTO RECIPROCANTE PARA GLIDE PATH

R-Motion Glider

	3×	21mm	S1.7B0.00.0GM.FK
	3×	25mm	S1.7B0.00.0GN.FK
	3×	31mm	S1.7B0.00.0GO.FK

15/.03

INSTRUMENTOS RECIPROCANTES PARA PREPARO

R-Motion 25

	3×	21mm	S1.7B0.00.0FR.FK
	3×	25mm	S1.7B0.00.0FS.FK
	3×	31mm	S1.7B0.00.0FT.FK

25/.06

R-Motion 30

	3×	21mm	S1.7B0.00.0FL.FK
	3×	25mm	S1.7B0.00.0FL.FK
	3×	31mm	S1.7B0.00.0FO.FK

30/.04

R-Motion 40

	3×	21mm	S1.7B0.00.0FJ.FK
	3×	25mm	S1.7B0.00.0FM.FK
	3×	31mm	S1.7B0.00.0FP.FK

40/.04

R-Motion 50

	3×	21mm	S1.7B0.00.0FK.FK
	3×	25mm	S1.7B0.00.0FN.FK
	3×	31mm	S1.7B0.00.0FQ.FK

50/.04

PONTAS DE PAPEL

Caixa de 200 pontas de Papel

	25/.06	08.610.06.025.BC
	30/.04	08.610.04.030.BC
	40/.04	08.610.04.040.BC
	50/.04	08.610.04.050.BC

GUTTA PERCHA

Caixa de 60 Gutta Percha

	25/.06	08.600.06.025.RE
	30/.04	08.600.04.030.RE
	40/.04	08.600.04.040.RE
	50/.04	08.600.04.050.RE

TOTALFILL® BC POINTS™

Caixa de 60 BC Points

	25/.06	08.650.06.025.RE
	30/.04	08.650.04.030.RE
	40/.04	08.650.04.040.RE
	50/.04	08.650.04.050.RE

TOTALFILL® BC SEALER™

Seringa 2g + 15 TotalFill BC Tips



08.650.00.007.XX

TOTALFILL® BC POINTS™ HIFLOW

Caixa de 60 BC Points HiFlow

	30/.04	08.650.04.030.HF
	40/.04	08.650.04.040.HF
	50/.04	08.650.04.050.HF

TOTALFILL® BC SEALER™ HIFLOW

Seringa 1,5g + 15 TotalFill BC Tips



08.650.00.008.XX

www.fkg.ch/r-motion

FKG Dentaire SA
Crêt-du-Loche 4
CH-2304 La Chaux-de-Fonds
Suíça
T +41 32 924 22 44

info@fkg.ch
www.fkg.ch



FKG REF. 99.7AA.00.10A.PT_REV0_2020-06 - © FKG DENTAIRE SA - AS IMAGENS DOS NOSSOS PRODUTOS NÃO SÃO CONTRATUAIS.



Distribuidor no Brasil:

Av. Aratãs, 164 - São Paulo, SP 04081-000 (11) 5542.5855 (11) 98919.6084 vendas@labordental.com.br labordental.com.br [labordental1977](https://www.facebook.com/labordental1977)