



FKG
swiss endo

RACE® EVO



○
**LEGADO
RACE**



SEGURO. EFICIENTE. CONTROLE SUAVE.

www.fkg.ch/race-evo

Um Legado Melhorado através da Evolução

RACE® EVO é a recente evolução do nosso popular e comprovado sistema rotatório RaCe. As funcionalidades RaCe originais altamente confiáveis, combinadas com tratamento térmico patenteado e maior capacidade de velocidade de rotação, tornam os instrumentos **RACE® EVO** ainda mais seguros, fáceis de controlar e mais eficientes do que nunca.

O tratamento térmico exclusivo combinado com funcionalidades do legado RaCe oferecem a combinação perfeita de força, durabilidade e controle. Com resistência inigualável à fadiga cíclica, eficiência de corte otimizada, mas não intrusiva, e um efeito de rosqueamento reduzido, o **RACE® EVO** foi criado para ser altamente seguro.



O tratamento térmico específico do **RACE® EVO** fornece propriedades mecânicas sem precedentes que, por sua vez, permitem uma maior velocidade para um tratamento mais rápido e mais confortável para os pacientes.

O design RaCe e mais de 20 anos de desempenho de confiança, associado a uma velocidade mais elevada, oferecem uma melhor eficiência com uma sensação familiar aos instrumentos RACE® EVO.

* A FKG recomenda a utilização dos instrumentos RACE® EVO a 1000 rpm.

Sua Abordagem. Sua Escolha.


RACE® EVO lhe permite escolher a abordagem terapêutica. Com a nossa seleção completa de instrumentos é possível tratar com sucesso várias anatomias do canal radicular. Basta começar com a sua sequência de instrumentos básica e trocar facilmente para o tamanho seguinte para um preparo do canal mais amplo, quando necessário.

PREPARO FINAL 4%	PREPARO FINAL 6%
<p>SEQUÊNCIA BÁSICA</p> <p>15/04</p> <p>25/04</p> <p>30/04</p>	<p>SEQUÊNCIA BÁSICA</p> <p>15/04</p> <p>25/04</p> <p>25/06</p>
<p>MÉDIO</p> <p>40/04</p>	<p>MÉDIO</p> <p>30/06</p>
<p>AMPLO</p> <p>50/04</p>	<p>AMPLO</p> <p>35/06</p>

RACE® EVO

15/04 — 15/04
 25/04 — 25/04
 30/04 — 25/06
 40/04 — 30/06
 50/04 — 35/06

UMA SEQUÊNCIA PARA A MAIORIA DOS SEUS CASOS

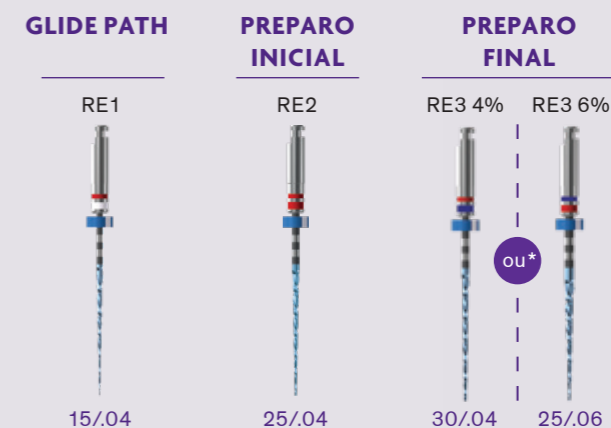

* Selecione o instrumento de preparo com base na sua abordagem terapêutica.

Maior Flexibilidade para um Novo Nível de Confiança

Os instrumentos RACE® EVO conservam as mesmas funcionalidades de design da gama RaCe, com o benefício adicional de maior flexibilidade. O processo de tratamento térmico exclusivo, identificável pela cor azul do instrumento, oferece até 1,4 vezes mais flexibilidade do que o instrumento Race convencional para melhor desempenho e progressão mais suave.



Antes do tratamento



Após o tratamento


FLEXIBILIDADE
x 1,4*

© Dr. Andreas Krokidis (Grécia), Todos os direitos reservados

Maior Resistência à Fadiga Cíclica

O **RACE® EVO** fornece até 2,8 vezes maior resistência à fadiga cíclica do que o seu antecessor, RaCe. Isto diminui o risco de fratura do instrumento e permite uma velocidade de rotação superior, aumentando a segurança e o conforto gerais para o paciente.

RESISTÊNCIA
x 2,8**

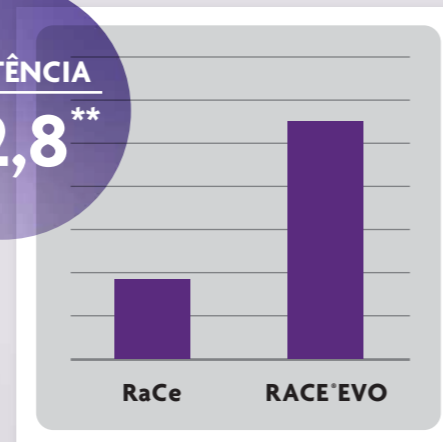


* Com base em resultados de laboratórios internos usando o RACE® EVO 4%.

** Com base em resultados de laboratórios internos; duração até à fratura à velocidade recomendada.

Eficiência de Corte Melhorada


O design triangular com afiadas arestas de corte do **RACE® EVO**, combinado com a velocidade de rotação superior oferece até 1,5 vezes maior eficiência de corte do que o sistema Race convencional.

EFICIÊNCIA
x 1,5*

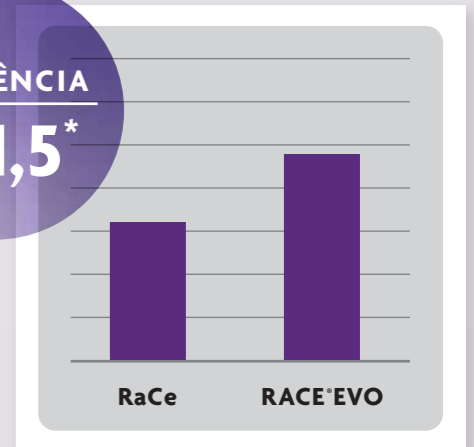

Orientado por Controle Absoluto há mais de 20 Anos

Além de melhorar a flexibilidade, melhorar a resistência à fadiga cíclica e capacidade de corte, os instrumentos **RACE® EVO** oferecem a mesma eficácia comprovada do nosso design RaCe.

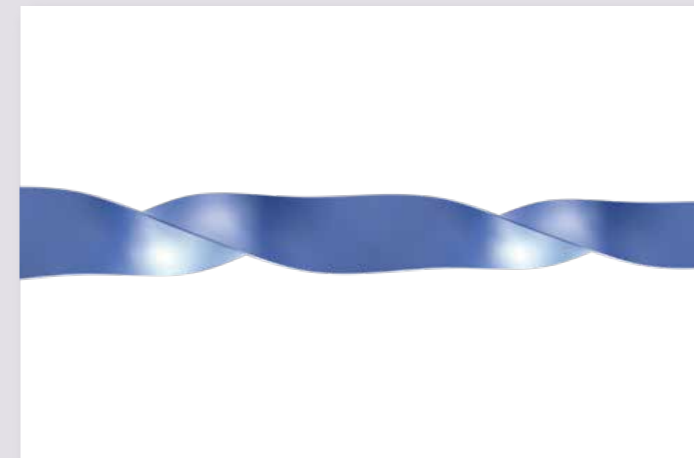

O design exclusivo e patenteado de arestas de corte alternadas reduz o efeito de rosqueamento, promovendo melhor controle da progressão do instrumento no canal.



O design especial da ponta de segurança arredondada, única do **RACE® EVO**, permite uma melhor progressão do instrumento pelo canal.

* Com base em resultados de laboratórios internos usando o RACE® EVO 4%.

RACE® EVO

Vantagens do design RaCe com tratamento térmico e utilização de velocidade superior:



+ 40%*
maior flexibilidade

x 2,8
maior resistência à fadiga cíclica

+ 50%
eficiência de corte melhorada

* Com base em resultados de laboratórios internos usando o RACE® EVO 4%.

Referências dos Produtos

SEQUÊNCIAS

Sequência RACE EVO 4%			
		3x 21mm	S1.7B0.00.SCV.FK
		3x 25mm	S1.7B0.00.SCW.FK
		3x 31mm	S1.7B0.00.SCX.FK

Sequência RACE EVO 6%			
		3x 21mm	S1.7B0.00.SCY.FK
		3x 25mm	S1.7B0.00.SCZ.FK
		3x 31mm	S1.7B0.00.SDA.FK

BLISTERS DE REFIL

RACE EVO 15/.04			
		6x 21mm	S1.7B0.00.0DG.FK
		6x 25mm	S1.7B0.00.0FZ.FK
		6x 31mm	S1.7B0.00.0DH.FK

RACE EVO 25/.04			
		6x 21mm	S1.7B0.00.0DI.FK
		6x 25mm	S1.7B0.00.0GB.FK
		6x 31mm	S1.7B0.00.0DJ.FK

RACE EVO 30/.04			
		6x 21mm	S1.7B0.00.0DK.FK
		6x 25mm	S1.7B0.00.0GC.FK
		6x 31mm	S1.7B0.00.0DL.FK

RACE EVO 40/.04			
		6x 21mm	S1.7B0.00.0DM.FK
		6x 25mm	S1.7B0.00.0GE.FK
		6x 31mm	S1.7B0.00.0DN.FK

RACE EVO 50/.04			
		6x 21mm	S1.7B0.00.0DO.FK
		6x 25mm	S1.7B0.00.0GF.FK
		6x 31mm	S1.7B0.00.0DP.FK

RACE EVO 25/.06			
		6x 21mm	S1.7B0.00.0DQ.FK
		6x 25mm	S1.7B0.00.0GH.FK
		6x 31mm	S1.7B0.00.0DU.FK

RACE EVO 30/.06			
		6x 21mm	S1.7B0.00.0DV.FK
		6x 25mm	S1.7B0.00.0GI.FK
		6x 31mm	S1.7B0.00.0DW.FK

RACE EVO 35/.06			
		6x 21mm	S1.7B0.00.0DX.FK
		6x 25mm	S1.7B0.00.0GJ.FK
		6x 31mm	S1.7B0.00.0GU.FK

Conicidade 4% Conicidade 6%

PONTAS DE PAPEL

Caixa de 200 Pontas de Papel		
	30/.04	08.610.04.030.BC
	40/.04	08.610.04.040.BC
	50/.04	08.610.04.050.BC
	25/.06	08.610.06.025.BC
	30/.06	08.610.06.030.BC
	35/.06	08.610.06.035.BC

GUTTA PERCHA

Caixa de 60 Gutta Percha		
	30/.04	08.600.04.030.RE
	40/.04	08.600.04.040.RE
	50/.04	08.600.04.050.RE
	25/.06	08.600.06.025.RE
	30/.06	08.600.06.030.RE
	35/.06	08.600.06.035.RE

TOTALFILL® BC POINTS™

Caixa de 60 BC Points		
	30/.04	08.650.04.030.RE
	40/.04	08.650.04.040.RE
	50/.04	08.650.04.050.RE
	25/.06	08.650.06.025.RE
	30/.06	08.650.06.030.RE
	35/.06	08.650.06.035.RE

TOTALFILL® BC SEALER™

Seringa 2g + 15 TotalFill BC Tips	
	08.650.00.007.XX

TOTALFILL® BC POINTS™ HIFLOW

Caixa de 60 BC Points HiFlow		
	30/.04	08.650.04.030.HF
	40/.04	08.650.04.040.HF
	50/.04	08.650.04.050.HF

TOTALFILL® BC SEALER™ HIFLOW

Seringa 1,5g + 15 TotalFill BC Tips	
	08.650.00.008.XX

Consultar a Labordental para saber quais produtos estão disponíveis no Brasil

www.fkg.ch/race-evo

FKG Dentaire SA
Crêt-du-Loche 4
CH-2304 La Chaux-de-Fonds
Suíça
T +41 32 924 22 44

info@fkg.ch
www.fkg.ch



FKG Dentaire SA
Crêt-du-Loche 4
CH-2304 La Chaux-de-Fonds
Switzerland

FKG REF. 99.7AA.00.IIA.PT_REV0_2020-06 - © FKG DENTAIRE SA - AS IMAGENS DOS NOSSOS PRODUTOS NÃO SÃO CONTRATUAIS.