

Smile Line ☺
www.smileline.ch

SMILE LITE MDP2

MOBILE DENTAL PHOTOGRAPHY



A NEW ERA IN DENTAL PHOTOGRAPHY





FÁCIL DE USAR. RESULTADOS INSTANTÂNEOS.

ACESSÓRIOS



DIFUSORES LATERAIS


Ótimos para suavizar a luz e realçar a textura da superfície.




FILTRO POLARIZADOR

Remove o reflexo da luz dos dentes e ajuda a determinar a sombra e o valor. Também ajuda a ver as caracterizações dentro do dente.


EXEMPLOS DAS INCRÍVEIS POSSIBILIDADES COM SMILE LITE MDP2 E UM SMARTPHONE:

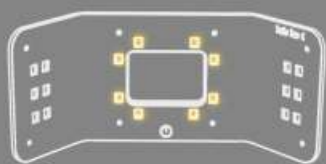


MDP2 com LEDs laterais em potência máxima, LEDs centrais desligados.

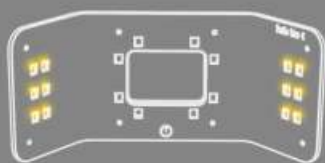

MDP2 com LEDs laterais em potência máxima, LEDs centrais desligados.

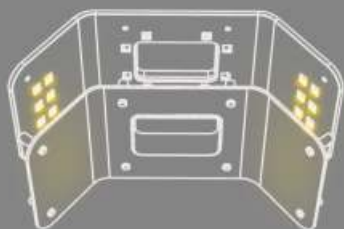

MDP2 com LEDs laterais em potência máxima + difusor, LEDs centrais desligados.

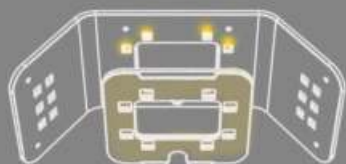

MDP2 com LEDs centrais em potência máxima + filtro polarizador, LEDs laterais apagados.



SMILE LITE MDP2

MOBILE DENTAL PHOTOGRAPHY

Smile Lite MDP2 é um dispositivo plug & play muito fácil de usar e que não requer qualquer aplicativo especial, processo de calibração ou aprendizado específico. Ele permitirá que você melhore enormemente seus resultados com a câmera do seu smartphone... com muita facilidade.

Ele se tornará rapidamente uma ferramenta obrigatória para você:

- » Fotos para tomada de cor
- » Comunicação diária com o laboratório
- » Comunicação com os pacientes
- » Vídeos curtos
- » Documentação dos pacientes
- » Imagens artísticas



SUPORTE
REMOVÍVEL

ENTRE 55 E
85 MM DE
LARGURA

O **Smile Lite MDP2** pode ser considerado um «mini estúdio fotográfico». Está equipado com três grupos de LEDs (Light Emitting Diodes): Cada grupo pode ser iluminado individualmente. Uma função dimmer oferece a possibilidade de definir quatro níveis diferentes de iluminação.

A parte traseira do Smile Lite MDP2 está equipada com um adaptador universal que é ajustável e se adapta a qualquer smartphone com largura entre 55-85 mm.



FÁCIL DE USAR



COMPATIBILIDADE
COM TODOS OS
SMARTPHONES



TECNOLOGIA DE
ILUMINAÇÃO LED



LEDS DE LUZ
DO DIA



4 NÍVEIS DE
ILUMINAÇÃO



RECARREGÁVEL
VIA USB-C



ACESSÓRIO
MAGNÉTICO



SUPER LEVE

A palavra do inventor do Smile Lite MDP : Prof. Louis Hardan

Confie na câmera do seu smartphone, conecte-a ao SmileLite MDP2 e comece a explorar o magnífico mundo da Mobile Dental Photography!

Caros colegas e amigos,

Em 2017, e após 5 anos de trabalho sério, o SmileLite MDP foi lançado em uma grande parceria com Styleitaliano e Smile Line SA. O sucesso foi enorme, dentistas em todos os países estão usando este dispositivo e muitas palestras e workshops foram realizados em todo o mundo, especialmente em universidades muito conhecidas.

A documentação é muito importante e mais de 90% dos dentistas em todo o mundo não têm nenhuma solução para suas fotos principalmente devido à complexidade de uso das câmeras DSLR, o investimento de tempo que seu uso exige e também pelo alto preço do equipamento.

SmileLite MDP foi uma solução fácil para um grande número de dentistas e estudantes graças à facilidade de uso, rapidez, conforto, peso e finalmente devido ao preço.

Outra vantagem é que se trata de um aparelho feito por um dentista para ser usado por seus colegas de profissão, conhecendo as necessidades do dia a dia da odontologia.

Após 5 anos de sucesso no mercado, estou orgulhoso e muito entusiasmado para apresentar o novo **SmileLite MDP2**, que oferece um design novo, moderno, mais leve e mais fino, com suporte integrado e LEDs de luz natural de última geração.

O **SmileLite MDP2** segue a filosofia de ser um mini estúdio oferecendo luz central independente e regulável, luzes laterais, com a nova possibilidade de difundir todas as luzes, inclusive a central, com um difusor especial, e a possibilidade de tirar fotos polarizadas com um filtro especial posicionado sobre a luz central.

O segredo de uma fotografia de sucesso é gerenciar corretamente a luz e com **SmileLite MDP2** você pode tirar todo tipo de fotos intraorais e retratos.

Fotos de alta qualidade são tão importantes em nossa prática diária, especialmente para documentar casos e se comunicar com o técnico de laboratório, e o mais importante: com nossos pacientes.

Neste folheto você poderá ver alguns exemplos de fotos que você pode tirar com seu smartphone e **SmileLite MDP2**. Com o **SmileLite MDP2** você terá o melhor gerenciamento de luz para câmeras de smartphones que estão evoluindo de forma incrível.

Desejo-lhe muita satisfação em seus primeiros passos com **Smile Lite MDP2!**

São os votos sinceros de
Prof. Louis Hardan DDS, CES, DEA, PhD
Chefe do Departamento de Odontologia Restauradora
e Estética da Universidade Saint-Joseph, Beirute



Descrição:

SMILE LITE MDP2 MASTER SET (imagem)

Ref.

#6700-MASTER