

Tratamentos em que
NEODRYS
Oferece Máxima
Absorção e Proteção das Bochechas

SELANTES
PREPARAÇÕES CAD/CAM
COMPÓSITOS
CIMENTAÇÃO
MOLDAGEM
DESGASTE SELETIVO
PREPAROS PARA AMÁLGAMA
ODONTOLOGIA A LASER
APLICAÇÕES DE FLÚOR
ORTODONTIA
PRÓTESE FIXA
TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO EXTRÍNSECA



Para mais informações sobre este produto entrar em contato com:



Desde 1977

Transformando o sorriso em estilo de vida.

Distribuidor no Brasil:

Av. Aratás, 164 - São Paulo, SP ▲ 04081-000 ☎ (11) 5542.5855 📞 (11) 98919.6084
✉ vendas@labordental.com.br 🌐 labordental.com.br 📱 labordental1977

CE

Patente E.U.A. No.
7425664
Patente Europeia No.
1676552

04/2016 - 1.000

NEODRYS®

Controle total da saliva liberada pela glândula parótida



Proteção e Retração das Bochechas

Melhores Condições Operatórias

microcopy



Desde 1977

Transformando o sorriso em estilo de vida.

NEODRYS®



Controle total da saliva liberada pela glândula parótida

Vantagens de NeoDryS

- ◆ Ausência de fios de algodão que se soltam e precisam ser removidos da cavidade oral
- ◆ Ganho de tempo com a proteção contra contaminação do campo operatório pela glândula parótida, por até 15 minutos
- ◆ Núcleo super absorvente—vida útil muito superior à dos roletes de algodão e outros métodos convencionais de absorção
- ◆ Recobrimento completo do ducto parotídeo e da mucosa oral
- ◆ A retração das bochechas facilita o trabalho nas porções mais posteriores da cavidade oral
- ◆ Design cônico e flexível acomoda os movimentos das bochechas
- ◆ Comfort Edge® oferece o máximo de conforto ao paciente
- ◆ Não se desloca durante o uso, mas pode ser removido facilmente com spray de água
- ◆ Fundo espelhado (ReFlective) para iluminação da cavidade oral

NeoDryS Supera a Concorrência

NeoDryS possui um núcleo que absorve a umidade rapidamente, proporcionando um campo operatório mais seco. Não ocorrem vazamentos indesejados, mesmo com o núcleo totalmente saturado. Sua barreira à prova de umidade protege a bochecha contra abrasão e reflete a luz para a área de trabalho. O Comfort Edge® patenteado elimina o uso de materiais abrasivos que causam desconforto aos pacientes. NeoDryS oferecem maior absorção, proteção e conforto do que qualquer outro produto no mercado.

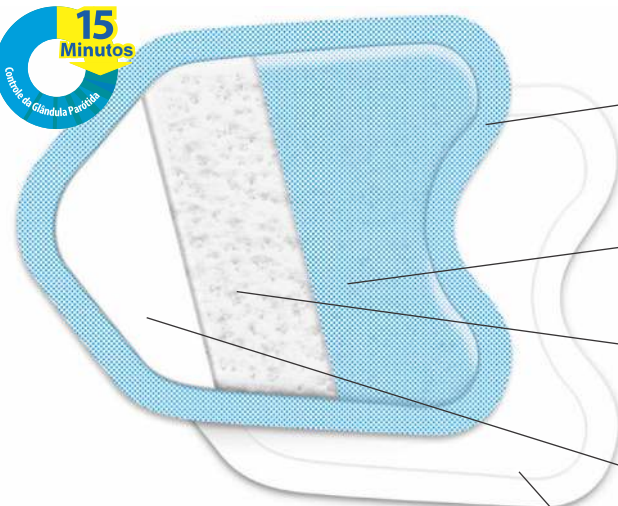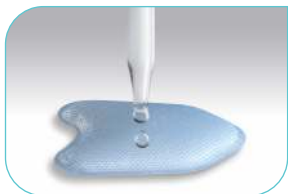

Todos os materiais são isentos de látex.

Comfort Edge® indolor

Nova tecnologia proporciona uma borda macia e flexível, sem cantos afiados, enquanto mantém a integridade do produto.

Delicado com a mucosa oral

Tela de polietileno de grau médico que adere suavemente ao tecido.

Núcleo super absorvente

O polímero de acrilato retém a umidade como um gel quando em contato com a saliva.

Núcleo enrijecido

Inserto de polietileno proporciona o máximo de rigidez para afastar a bochecha

Barreira Protetora

Opção de fundo branco (Original) ou espelhado (ReFlective), que reflete a luz na cavidade oral enquanto protege a bochecha.

Tamanhos Codificados por Cores

NeoDryS são codificados por cores para facilitar a sua identificação.

Disponíveis em dois tamanhos:

Grande (azul) e **Pequeno** (amarelo).

Acondicionados em embalagens práticas contendo 50 unidades.



Escolha do Fundo


O fundo pode ser espelhado (ReFlective) para aumentar a iluminação, como um espelho, ou branco (Original).




Modo de Usar

Definir o tamanho de NeoDryS mais adequado para recobrir a mucosa bucal. Inserir como ilustrado abaixo, com o lado colorido contra a bochecha e a parte cônica para o fundo da boca. Em poucos segundos, NeoDryS vai aderir ao tecido e ficar posicionado. **Importante:** Para não irritar o tecido durante a remoção, aplicar jatos de água sobre a face bucal do NeoDryS.


Como usar NeoDryS

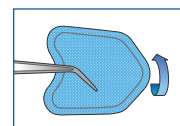

Lado colorido colado à bochecha

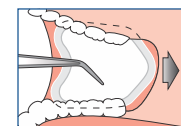

Parte cônica na direção do fundo da boca

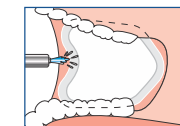

Spray para remover

