

SHOFU DISK
ZR
Lucent

Altamente translúcido, altamente estético, altamente durável!



SHOFU Disk ZR Lucent

Descubra a diferença

SHOFU Disk ZR Lucent é um material de zircônia altamente translúcido (5Y-PSZ) para a fabricação de restaurações estéticas anteriores e posteriores.

Os discos fresáveis pré-sinterizados estão disponíveis em monocamada e em algumas versões multicamadas. São compatíveis com todos os sistemas CAD/CAM tradicionais, devido à sua boa fresabilidade e ao seu diâmetro de 98,5 mm. O SHOFU Disk ZR Lucent combina uma excelente resistência à flexão, superior a 1.000 Mpa, com uma alta transmissão de luz (semelhante à do dissilicato de lítio), para que você possa usá-lo para uma ampla variedade de indicações.

Complete suas restaurações com stains e glaze Vintage Art Universal, estratificando em camadas mínimas na técnica cut-back com Porcelanas Vintage ZR.



A elevada translucidez e a mistura harmoniosa de cores dos discos Multicamada permitem que você combine perfeitamente suas restaurações com a dentição natural através apenas da maquiagem.


O dente 21 recebeu uma faceta monolítica SHOFU Disk ZR Lucent com maquiagem e glazeado.
Trabalho do TPD Nick Mekias, Atenas, Grécia.

Benefícios e indicações

- Discos de zircônia multicamadas com resistência à flexão superior a 1.000 MPa
- Translucidez semelhante à do dissilicato de lítio
- Adequado para coroas e pontes anteriores (até 6 elementos)
- Adequado para coroas e pontes posteriores (até 3 elementos)
- Mistura natural e harmoniosa de tons – dos aspectos incisais aos cervicais

3-5-1: Três Tons, Cinco Camadas e em Um Disco

A transição suave de tons nos discos de cinco camadas cria uma mistura harmoniosa e realista de cores do esmalte (uma camada, 30%) à dentina (três camadas, 35%) e à área cervical (uma camada, 35%).

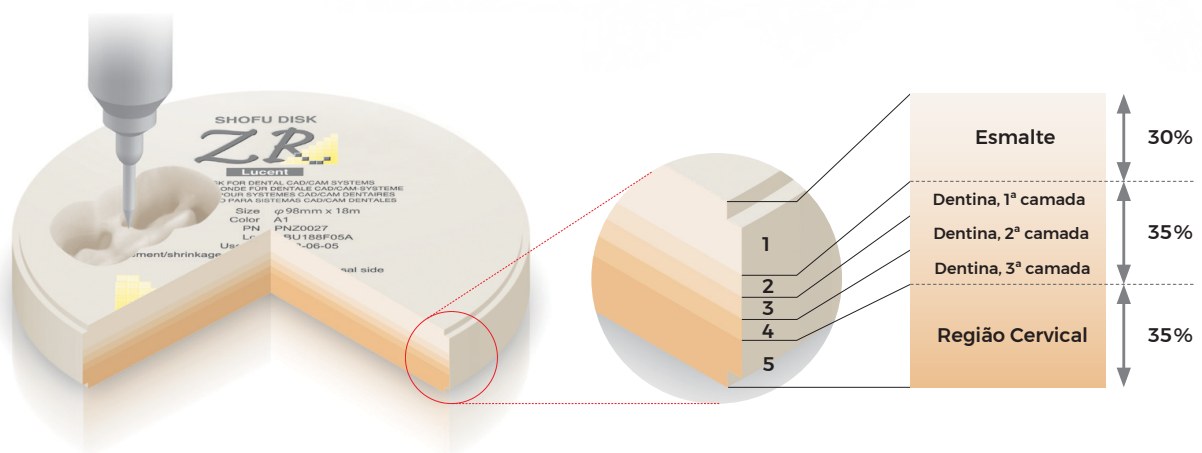

Dependendo da posição vertical da restauração planejada, você pode reproduzir várias cores de um mesmo grupo de cores usando apenas um disco, sem nenhuma maquiagem complicada.

SHOFU Disk ZR Lucent é feito inteiramente de pó TOSOH de alta qualidade. Graças a um processo de fabricação especial, este material monolítico apresenta uma resistência à flexão excelente, superior a 1.000 MPa, apesar de sua alta translucidez.

Dados técnicos

Diâmetro	98,5mm com ranhuras
Tamanhos	12mm, 14mm, 16mm, 18mm e 22mm
Cores	Monocamada: Trans Multicamada: A1, A2, A3, A3,5, B1, C1 e D2
Resistência à flexão, sinterizado (MPa)	1.019 MPa (DIN ISO 6872:2015)
Coefficiente de expansão térmica	$10,2 \times 10^{-6} K^{-1}$ (25 °C - 500 °C)
Dureza Vickers, não sinterizado (HV 02)	45 HV (DIN ISO 6507:2005)
Temperatura de sinterização	1.450°C
Translucidez (espessura 1 mm)	Monocamada Translúcida 37% Multicamada Incisal 34% Multicamada Cervical 31%

Informações para pedidos

Disco	↕ 12 mm	↕ 14 mm	↕ 16 mm	↕ 18 mm	↕ 22 mm
Trans (Monocamada)	Z0100	Z0022	Z0112	Z0026	Z0030
A1 (Multicamada)	Z0101	Z0023	Z0113	Z0027	Z0031
A2 (Multicamada)	Z0102	Z0024	Z0114	Z0028	Z0032
A3 (Multicamada)	Z0103	Z0025	Z0115	Z0029	Z0033
A3,5 (Multicamada)	Z0104	Z0108	Z0116	Z0120	Z0124
B1 (Multicamada)	Z0105	Z0109	Z0117	Z0121	Z0125
C1 (Multicamada)	Z0106	Z0110	Z0118	Z0122	Z0126
D2 (Multicamada)	Z0107	Z0111	Z0119	Z0123	Z0127



SHOFU INC.

11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto 605-0983, Japan

SHOFU DENTAL BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.

AV FAGUNDES FILHO, 134, CONJ 61, VILA MONTE ALEGRE, SAO PAULO, SP, 04304-000, Brasil

www.shofu.com



Desde 1977

Labordental

Transformando o sorriso em estilo de vida.

Distribuidor no Brasil

Av. Aratás, 164 - São Paulo, SP ▲04081-000 📞 (11) 5542.5855 📞 (11) 98919.4084 📧 vendas@labordental.com.br 🌐 labordental.com.br 📱 labordental1977