

MONO 7

Uma nova maneira de fazer moldagem odontológica:
Rápida, precisa e agradável

O prazer da precisão sem esforço!



Experiência CAD/CAM
rápida e tranquila →
impressões digitais
limpas, precisas e nítidas



LASCOD

Alginate MONO 7



Características

- ✓ Alginate Dust free (livre de poeira)
- ✓ Tixotrópico
- ✓ Aroma refrescante: tangerina
- ✓ Cor após a presa: laranja
- ✓ Detalhe da cópia: 20µm
- ✓ Recuperação elástica: 95,5%
- ✓ Estabilidade dimensional: 7 dias
- ✓ Excepcional capacidade de digitalização → os detalhes anatômicos - desde as linhas marginais até as cristas palatinas e cúspides - são capturados com clareza.
- ✓ Proporção da mistura: 9g de pó / 20ml de líquido

Tempo de mistura manual	45"
Tempo total de trabalho	1'55"
Tempo de presa na cavidade oral	30"


*Tempos medidos a 23°C, com água deionizada. Temperaturas mais elevadas reduzem os tempos e temperaturas reduzidas aumentam os tempos.

Vantagens

- ✓ Conforto excepcional para o paciente
- ✓ Longo tempo de trabalho
- ✓ Alta precisão
- ✓ Alta estabilidade dimensional
- ✓ Presa super rápida
- ✓ Compatibilidade com sistemas CAD/CAM
- ✓ Instruções de uso na embalagem

Apresentação

- ✓ **MONO 7:** Pacote com 450g

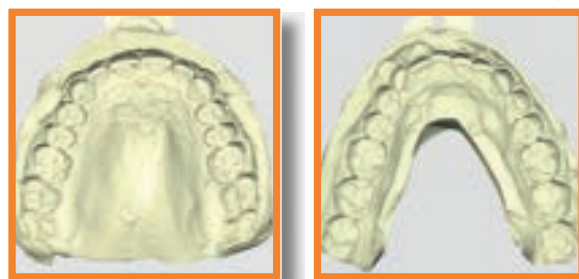

Imagens após escaneamento



LASCOD S.p.A

Via L.Longo, 18 - 50019 Sesto Fiorentino, Florença - Itália
www.lascod.com



Desde 1977

Labordental

Transformando o sorriso em estilo de vida.

Para mais informações:



Distribuidor no Brasil

Av. Aratãs, 164 - São Paulo, SP 04081-000 (11) 5542.5855 (11) 98919.4084 vendas@labordental.com.br labordental.com.br labordental1977