

POLIDORES PARA METAL

STEELPROFI

Flexíveis - para polimento em cromo-cobalto e níquel-cromo. Autoclaváveis.




ALPHAFLEX

Para polimento de todas as ligas preciosas e semi-preciosas e amálgama. Autoclaváveis.

CHROMOPOL

Polidor muito abrasivo para metal cromo cobalto e metais duros.

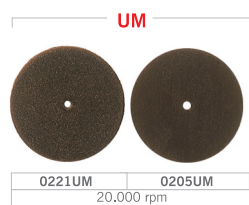

OCCLUPOL PARA METAL

Para superfície oclusal e particularmente para zonas de difícil acesso em todas ligas metálicas. Autoclaváveis.

MARROM: Para acabamento
VERDE: Para polimento
MANDRIL: Para occlusal




ESTOJO OCCLUPOL 1109
50x marrom; 25x vermelho;
25x verde; 1x mandril;
1x apontador;
1x escova de aço para limpeza.




EXA-DENTAL

Borracha para polimento universal.

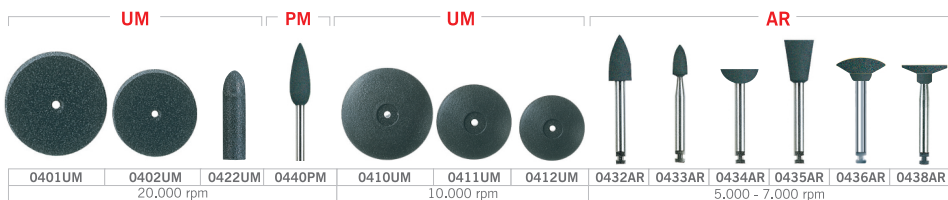


MANDRIS E ADAPTADORES

Mandris e adaptadores em aço inoxidável.

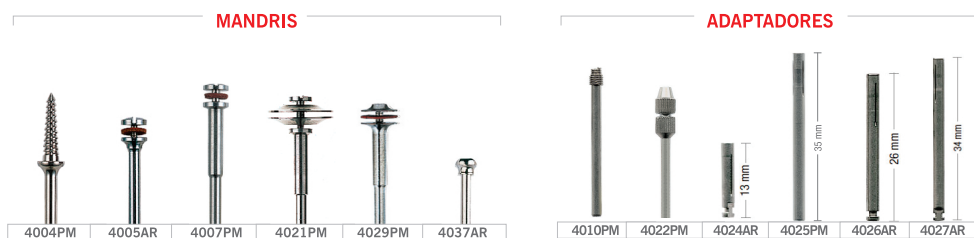


BROCAS DE CARBONETO DE TUNGSTÊNIO PM

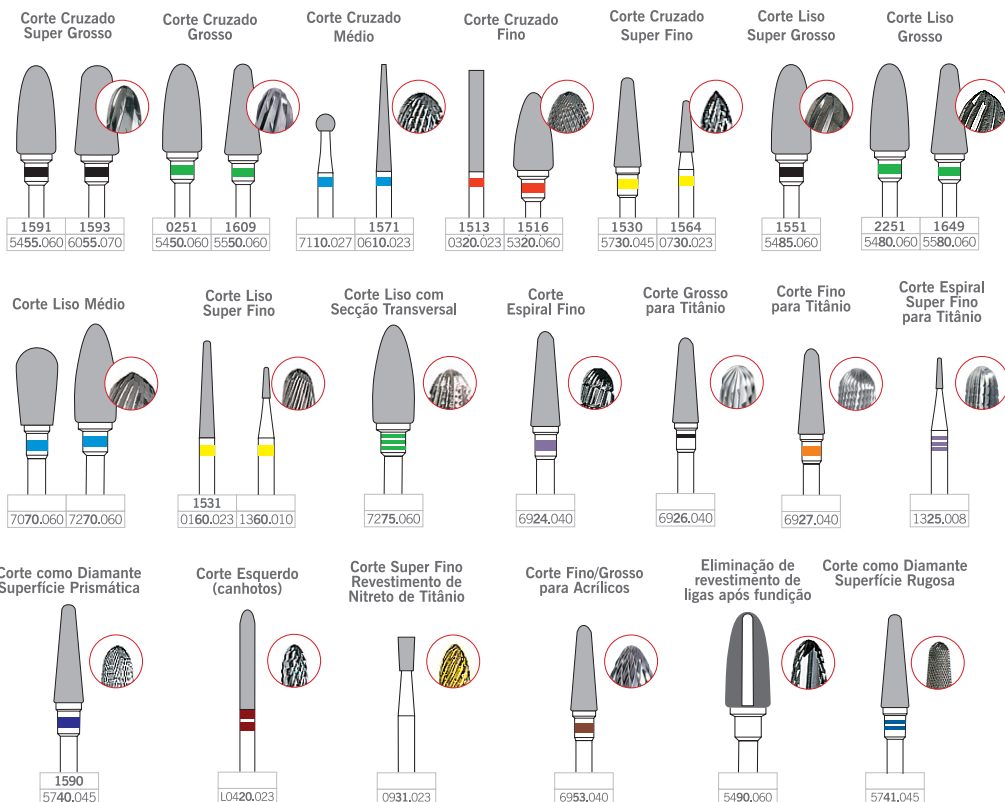


Visite nosso site para conhecer todos os modelos disponíveis, as indicações de uso e velocidades recomendadas.

BROCAS DE CARBONETO DE TUNGSTÊNIO FG

Remoção de adesivo

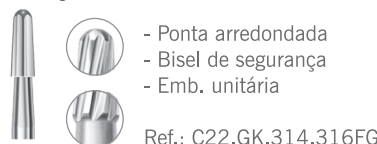

Acabamento de Cerâmica

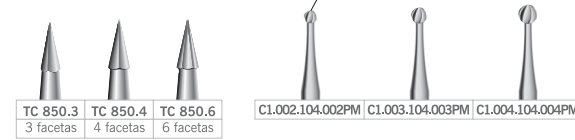

Remoção de amálgama e resinas



Corte de Coroas



Conheça também:
Brocas Cirúrgicas, Pontas Diamantadas, Discos Diamantados Flexíveis, Pinos para Troquel e Titanium.

Legenda:

FG	Alta rotação
AR	Contra-ângulo
PM	Peça-de-mão
UM	Não montados
●	Impregnado com diamante

Distribuidor no Brasil:
Av. Aratás, 164 - São Paulo, SP - 04081-000 (11) 5542.5855 (11) 98919.6084 vendas@labordental.com.br labordental.com.br



Distribuidor no Brasil Desde 1977


Transformando o sorriso em estilo de vida.

09/2021 - 2,000

POLIDORES PARA RESINA COMPOSTA

EXA-INTRAPOL

Para acabamento e polimento. Cor branca. Autoclaváveis.

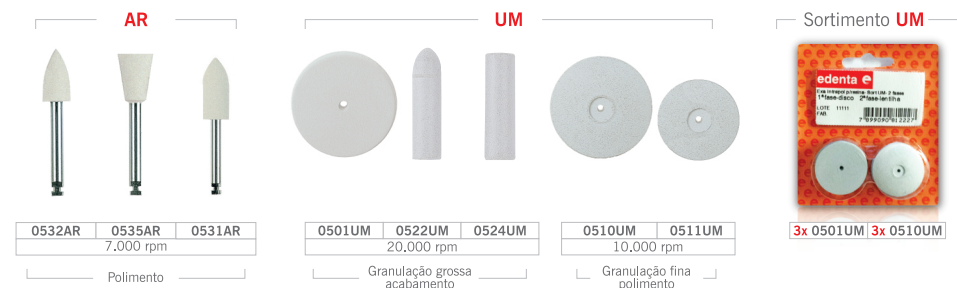

DIAGLOSS

Impregnados com diamante. Para escultura e polimento de alto brilho. Eliminam a necessidade de uso de brocas "carbide" e diamantadas. Autoclaváveis.



EXA-SPECIAL

Polidor universal para compósitos de micropartículas. Para brilho superficial, acetinado e duradouro. Cor amarela. Autoclaváveis.



TOPGLOSS

Impregnados com diamante. Para acabamento e polimento de superfícies em uma única etapa. Especialmente desenvolvidos para técnica de polimento em resina composta. Autoclaváveis.



OCCLUPOL PARA RESINA COMPOSTA



FLEXI-SNAP

Os discos para polimento Flexi-Snap produzem uma lisura superior à produzida pelos discos convencionais e permitem obter um brilho perfeito. São utilizados para criar um alto brilho natural em todos os tipos de compósitos.



POLIDORES PARA RESINA ACRÍLICA


EXA-TECHNIQUE

Polidores de silicone para acrílicos protéticos e ortodônticos. Substituem a lixa em áreas de difícil acesso. Autoclaváveis.

VERDE: Acabamento (granulação grossa): 10.000 - 15.000 rpm.

PRETO: Pré-polimento (granulação média): 10.000 - 15.000 rpm.


AMARELO: Polimento (granulação fina): 5.000 - 7.000 rpm.

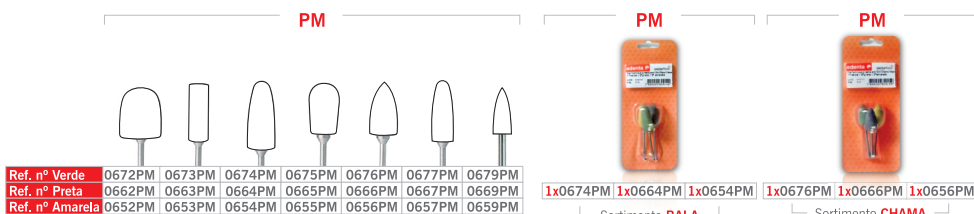

ABRASIVOS PARA CERÂMICA

SUPERMAX

Abrasivos de diamante sinterizado com aglutinante orgânico. Alta eficiência para desgaste de metal e porcelana, totalmente livre de aquecimento. Adequados para desgaste e corte dos sprues em cerâmica prensada e copings de alumina, zircônia e dissilicato de lítio.

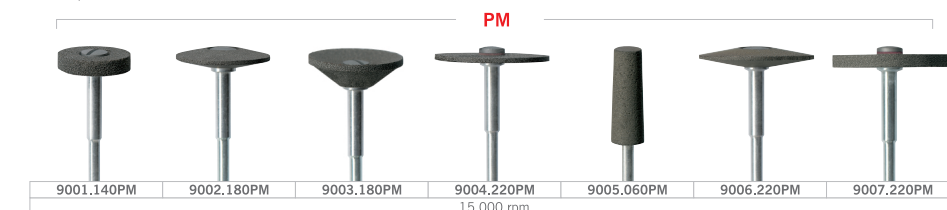


CERAPRO

Impregnado com diamante - para desgaste inicial na porcelana, sem aquecimento. Indicado especialmente para cerâmica pura e copings de alumina, zircônia e dissilicato de lítio. Recomendável para zircônia com resistência flexural até a 900 MPa.




CERATEC

Pedras abrasivas impregnadas com diamante e indicadas para desgaste de todos os tipos de cerâmicas, puras ou aplicadas sobre metal. Recomendável para zircônia com resistência flexural superior a 900 MPa.

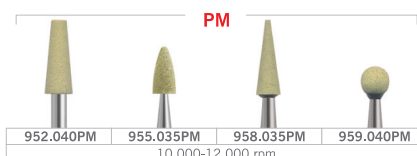

CERASTAR

Pedras em cerâmica e diamante, unidas em uma nova granulação híbrida progressiva. Para desgaste de todas as cerâmicas puras, especialmente as vítreas, de modo suave, evitando a formação de microfaturas.

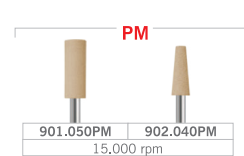

POLIDORES PARA CERÂMICA



EXA-CERAPOL / CERAPOL SUPER

Polidores em silicone para acabamento, polimento e brilho em porcelana. Autoclaváveis.

CINZA CLARO: Para pré-polimento: eliminam riscos e imperfeições da superfície.

ROSA: Para polimento: com leve abrasão, mantendo a estrutura anatômica do dente.

CINZA-ESCURO: Para brilho final sem pasta de polimento.

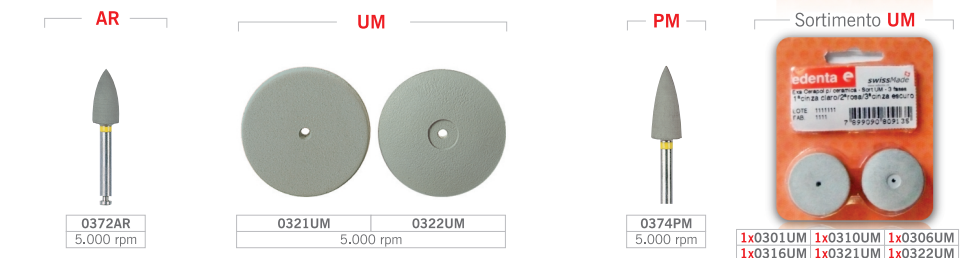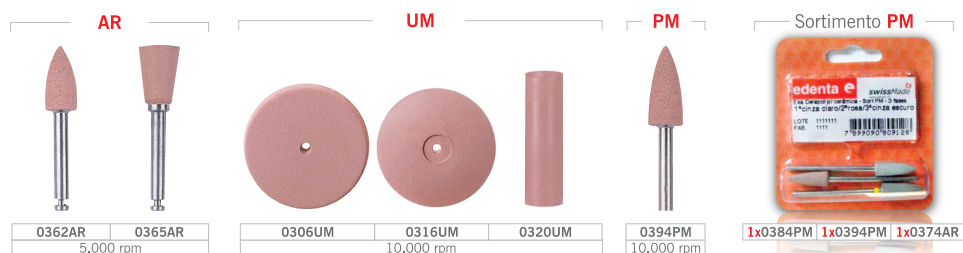

Disponíveis também em outros modelos PM. Consultar.

CERAGLOSS

Impregnados com diamante. Recomendados para todos os tipos de cerâmica, inclusive cerâmica prensada, alumina e zircônia. Recomendado também para resinas com carga cerâmica. Autoclaváveis.

VERDE: Pré-polimento.

AZUL: Polimento.

AMARELO: Super-polimento.



Disponíveis também em PM. Consultar modelos.